

# Olaqin<sup>®</sup>



**VITAL'ACT NEO**

Mode d'emploi

**La présente notice a pour objectif de permettre une prise en main rapide du VITAL'ACT-NEO. Les principales fonctionnalités du lecteur y sont présentées :**

- le contenu de la boîte
- les caractéristiques du VITAL'ACT-NEO :
  - les insertions cartes
  - les principes de navigation
- l'initialisation du VITAL'ACT-NEO
- la configuration de la solution qui se fait en 3 temps :
  - sur le lecteur
  - sur le logiciel en ligne, depuis un téléphone
  - sur le poste de travail depuis le logiciel de gestion de cabinet
- la création d'une Feuille de Soins Électronique (F.S.E.) en mobilité
- la présentation du menu principal du lecteur
- les caractéristiques techniques du lecteur

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter votre revendeur.

## CONTENU DE LA BOÎTE





1 – Un VITAL'ACT-NEO



2 – Un câble USB

## PRÉSENTATION DU VITAL'ACT-NEO

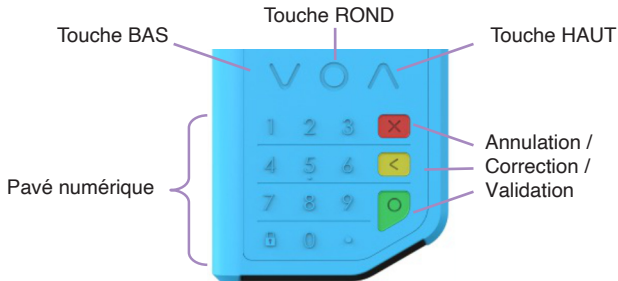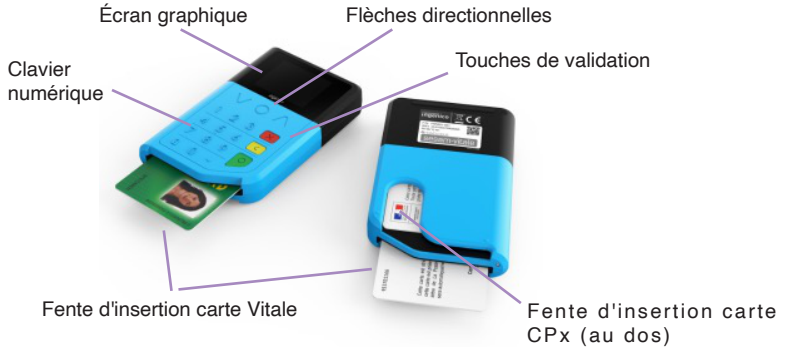

ME-VITALACTNEO-A

4/14 VITAL'ACT-NEO/ Guide utilisateur  
Copyright © 2023 Olaqin/ All rights reserved

Olaqin 

## INSERTIONS CARTES

La carte Vitale (ou autre carte associée) du patient s'insère dans le lecteur par la fente située sous le clavier, orientée comme indiqué sur la photo.



La Carte du Professionnel de Santé (CPS) s'insère obligatoirement dans la fente inférieure du lecteur.

## PRINCIPES DE NAVIGATION

 ou 

La flèche « **BAS** » permet de rentrer dans le menu principal depuis la page d'accueil.


Une fois dans le menu principal, les flèches « **BAS** » et « **HAUT** » permettent de naviguer verticalement dans la liste des menus.

 ou 

Les touches « **ROND** » et « **VAL** » valident les saisies et les sélections dans un menu.

Lors de la navigation dans une liste de menus, la sélection d'un menu peut afficher les sous-menus associés.

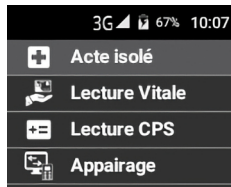

La touche « **ANN** » permet d'annuler une saisie qui vient d'être faite, d'annuler un choix dans un menu et de revenir à la page d'accueil lorsque c'est possible.



Lors d'une saisie la touche « **CORR** » efface les caractères un à un.

Lors de la navigation dans les menus, la touche remonte dans le menu parent.

## INITIALISATION DU LECTEUR AVANT PREMIÈRE UTILISATION



**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DU VITAL'ACT-NEO, IL EST RECOMMANDÉ DE CHARGER COMPLÈTEMENT LE LECTEUR**

**UTILISER LE CABLE USB FOURNI ET UN BLOC SECTEUR (non inclus)**



Batterie en charge




Batterie chargée

### DÉMARRAGE DU LECTEUR

**Une fois la charge terminée, démarrer le VITAL'ACT-NEO :**

**1/** Insérer la carte CPS dans le **lecteur**.

**2/ Allumer le lecteur** (appui long sur le bouton « **VAL** »  )

**3/ Laisser le lecteur se connecter au réseau** (la première connexion peut prendre plusieurs minutes).

**4/ Suivre les étapes suivantes dans l'ordre pour initialiser la solution :**

- configuration du Lecteur (p. 8),
- configuration du logiciel VITAL'ACT en ligne depuis un téléphone (p. 9),
- configuration du LGC (page 10)

**5/ L'accès au logiciel VITAL'ACT en ligne nécessite l'application e-CPS.**  
Se munir du téléphone sur lequel l'application est installée.

En savoir plus sur la e-CPS : <https://esante.gouv.fr/produits-services/e-cps>


## CONFIGURATION DU LECTEUR

### CONFIGURATION DU LECTEUR ET INITIALISATION DU LOGICIEL VITAL'ACT EN LIGNE (Lecteur)


Une fois connecté, le lecteur VITAL'ACT NEO affiche les instructions pas-à-pas pour initialiser le logiciel VITAL'ACT en ligne.

Les principales étapes sont les suivantes :


1/ Insérer la CPS dans le lecteur

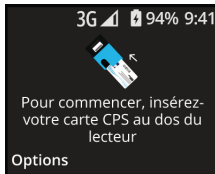


2/ Saisir le code CPS

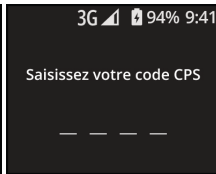



3/ Confirmer pour continuer

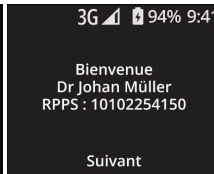

4/ Ouvrir l'appli e-CPS sur téléphone

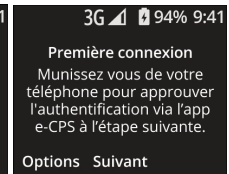

5/ Saisir dans l'appli e-CPS le code affiché

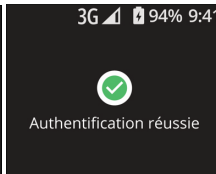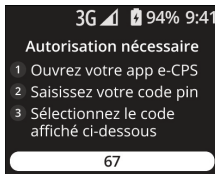

6/ Ouvrir l'URL affichée sur un téléphone






# CONFIGURATION DU LOGICIEL VITAL'ACT EN LIGNE

## PREMIÈRE CONNEXION À VITAL'ACT EN LIGNE (Téléphone)

Sur téléphone, se connecter à l'URL [www.vitalact.fr](http://www.vitalact.fr) ou scanner le QRCode suivant :



Depuis le lecteur VITAL'ACT NEO, le QRCode est affiché depuis le menu principal en appuyant 2 fois de suite sur le bouton « ROND » 

Une fois connecté grâce à Pro Santé Connect au logiciel VITAL'ACT en ligne, suivre le pas-à-pas pour finaliser la configuration :

**1/ Indiquer l'entête FSE** du lecteur. Cette valeur pourra être modifiée ensuite depuis le LGC

Paramétrage du Vital'Act NEO

Paramétrer l'entête FSE de votre Vital'Act NEO

Sélectionnez un entête FSE pour votre nouveau lecteur (entre 001 et 999)

Vous aurez à tout moment la possibilité de modifier l'entête depuis votre logiciel de gestion de cabinet.

**2/ Renseigner le nom et le mot de passe** du réseau Wifi du cabinet pour connecter le lecteur.

Paramétrage du Vital'Act NEO

Configurer le Wifi de votre Vital'Act NEO

Votre lecteur Vital'Act NEO communiquerait avec le bac votre boîte de travail. Pour utiliser votre lecteur avec votre logiciel de gestion de cabinet, il est nécessaire de connecter le Vital'Act NEO au Wifi de votre box internet.

SSID Wifi  
RESEAU\_WIFI

Sécurité  
WPA2

Mot de passe Wifi  
.....

Pour finaliser la configuration, configurer le lecteur dans le LGC.

## CONFIGURATION DU LECTEUR DANS LE LGC

### PARAMÉTRAGE DU LECTEUR DANS LE LGC (Poste de Travail)

**Pour finaliser la configuration de la solution, paramétrer le lecteur sur le poste de travail.** Grâce au driver Olaqin, le lecteur VITAL'ACT NEO est connecté par Wifi en mode PC/SC avec le LGC.

**IMPORTANT** : Il est **indispensable que le lecteur VITAL'ACT NEO soit connecté sur le même réseau que le poste de travail** pour être détecté comme lecteur PC/SC par le LGC.


**1/ Télécharger** le pilote PC/SC sans-fil du VITAL'ACT NEO depuis le site OLAQIN sur le poste de travail :

<https://www.olaqin.fr/actualite-et-soutport-de-votre-vitalact-neo>

**2/ Installer** le pilote sur le poste de travail où est installé le LGC. Pour s'assurer que le pilote est installé, vérifier dans le gestionnaire de périphériques que le pilote « **OLAQIN TLS Reader** » est présent.



**3/ Dans le LGC, paramétrer le lecteur en mode PC/SC et l'identifier comme « Lecteur TLA ».**

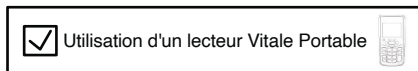


## CRÉATION D'UNE FSE EN MOBILITÉ

Le logiciel VITAL'ACT en ligne permet la facturation SESAM-Vitale en mobilité avec un téléphone connecté.

### ACCÈS AU LOGICIEL VITAL'ACT EN LIGNE


Accéder au logiciel en suivant une des 2 méthodes suivantes :

- Ouvrir le navigateur internet et taper l'URL [www.vitalact.fr](http://www.vitalact.fr)
- Scanner le QRCode depuis le lecteur en appuyant 2 fois depuis le menu principal sur le bouton « ROND » 

### CONNEXION AVEC LA e-CPS

L'authentification se fait grâce à Pro Santé Connect.

Utiliser l'**application e-CPS** pour confirmer la connexion

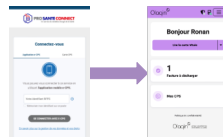

### ACCÈS SÉCURISÉ ET DÉMARRAGE D'UNE FSE

Pour démarrer une FSE, insérer la carte Vitale dans le lecteur et cliquer sur « Lire la carte Vitale ».

Confirmer l'accès sécurisé aux données (soit par e-CPS, soit par saisie du code CPS sur le lecteur).

L'accès complet aux données autorise la facturation en mobilité.



### FACTURATION ET SÉCURISATION

Suivre sur le téléphone les **étapes de facturation** et la **sécurisation** de la FSE. Les FSE pourront **être déchargées** dans le LGC de retour au cabinet.

# MENU PRINCIPAL DU LECTEUR

## FONCTIONNALITÉS DU LECTEUR

**Pour afficher le menu principal, appuyer sur la touche « BAS »**   
depuis la page d'accueil



### Acte isolé

Afficher le QRCode et l'URL d'accès à VITAL'ACT en ligne



### Réglages

Accéder aux paramètres du lecteur (Wifi, luminosité, son, etc..)



### Lecture Vitale

Consulter les informations de la carte Vitale



### A propos de

Afficher les informations et numéros de version du lecteur



### Lecture CPS

Consulter les informations de la CPS



### Maintenance

Entrer dans le menu maintenance (réservé au cas de support)



### Appairage

Appairer un VITAL'ACT-NEO avec un compte existant

## Caractéristiques techniques

<b>CPU</b>	Quadcore 1,3 GHz
<b>Mémoires</b>	RAM : 512 Mo / Flash : 4 Go
<b>Écran</b>	Écran couleur LCD TFT 1,77" QVGA 128x160
<b>Interfaces cartes</b>	2 interfaces cartes (carte CPS et carte Vitale)
<b>Clavier</b>	18 touches (alphanumérique et navigation)
<b>Batterie</b>	1000mAh Li-ion 3,7 V Rechargeable via câble USB relié au poste de travail
<b>Connectivité</b>	GSM GPRS EDGE (2G) : 850/900/1800/1900 MHz UMTS (3G) : 900/2100 MHz Wifi : 802.11 b/g/n 2,4 GHz
<b>Dimensions</b>	116,3 x 72,45 x 18,95 mm
<b>Poids</b>	141 g
<b>Certifications</b>	CE, RoHS, WEEE
<b>Environnement</b>	Température d'utilisation 5°C à 40°C à 85 % d'humidité Température de stockage -10°C à 60°C

Olaqin 

Olaqin S.A.S.

Société au capital de 10 931 186 €

28 quai Gallieni 92150 Suresnes France / 852 722 750 R.C.S. Nanterre